
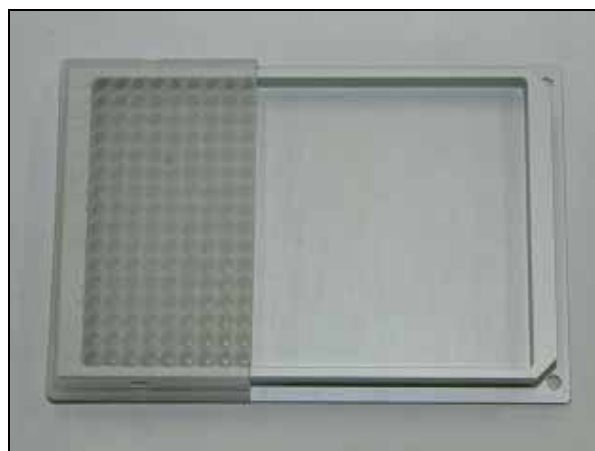


PCR Plate Positioner 「 P3 」

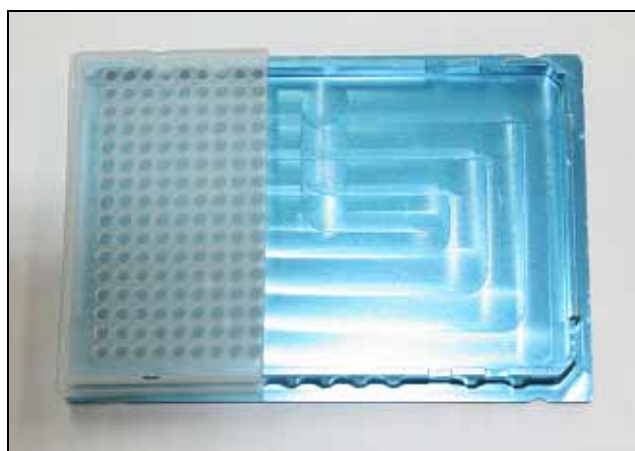

384well PCR Plate 用

SBS 規格対応

各メーカー製 PCR Plate に対応

サイズ

高さ 14.0mm

幅 127.7mm

奥行 85.5mm

外装 白アルマイト処理

材質 アルミニウム

重量 150g

アプリケーション例

384well PCR Plate は剛性が低いため、自動分注装置でサンプルを分注や吸引などを行うことが出来ませんでした。Positioner を使用することにより、剛性を上げまた水平にすることにより、自動分注装置が使用可能になります。

PCR Plate にシールする場合、Positioner を使用すれば Plate が固定されるので、容易になります。また、シーラーも使用可能になります。

マイクロプレート用シェーカーなども使用可能になります。

[ご使用中の PCR Plate に合わせて、特注のサイズや仕様で製作も可能です。](#)

販売元

販売代理店



アイエス・テクノロジー・ジャパン株式会社




〒300-2635 茨城県つくば市東光台 5-9-1

TEL: 029-848-3308

FAX: 029-848-3309

PCR Plate Positioner 「 P3 」

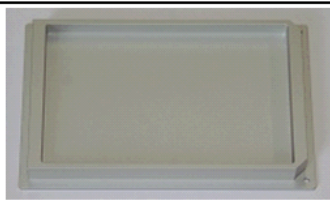384well PCR Plate Positioner適合表

	Positioner 品番	P3-100 (リフ ^付 無)	P3-200 (小リフ ^付)	P3-300 (リフ ^付)
	Positioner 図番	J07-0668-M01002-1	J08-0739-M01001	J09-0870-M07001
	COLOR	白	青	黒
	定価(1枚)	¥23,000	¥42,000	¥50,000
Plateメーカー名	Plate品番			
日本シネティクス (Sorenson)	38971	× (弱い)	△	△
日本シネティクス (Sorenson)	39691	○	×	○
日本シネティクス (ABGene)	AB-1384	× (弱い)	○	N/A
日本シネティクス (ABGene)	TF-0384	○	○	N/A
サーモフィッシャー (カルシメック / ABGene)	TF-0384	○	○	N/A
クライター	785201	× (弱い)	○	N/A
クライター	785290	△	× (弱い)	N/A
アライドハイオシステムズ	4309849	○	○	N/A
Roche		× (弱い)	○	N/A
4titude		N/A	N/A	N/A
AxyGen		N/A	N/A	N/A

○・・・問題無し ×・・・嵌合しません △・・・嵌合が強い N/A・・・未確認

販売元

販売代理店



アイエス・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒300-2635 茨城県つくば市東光台 5-9-1

TEL: 029-848-3308

FAX: 029-848-3309